

“The Health”

医療用
製品カタログ

A product catalogue for medical care

IZUMO
Health

目 次

製品の材質について	2
泌尿器系カテーテル	
ザヘルス ネラトンカテーテル	3～4
ザヘルス シリコンネラトンカテーテル	5～6
ザヘルス ロートネラトンカテーテル	7
ザヘルス チーマンカテーテル	8
消化器系カテーテル	
ザヘルス 胃カテーテル	9
ザヘルス 腸カテーテル	10
ザヘルス 栄養カテーテル	11
耳鼻・眼科・脳神経系製品	
ザヘルス エネマシリンジ	12
その他の製品	
レーベン管	13
カテーテルサイズ換算表	14

※ 「ザヘルス」は株式会社イズモヘルスの登録商標です。

※ 製品の規格・外観は改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

※ 本カタログは株式会社イズモヘルスの規格品を掲載しております。他社向けOEM製品は掲載しておりませんので、予めご了承ください。

製品の材質について

●天然ゴム使用製品

ザ ヘルス ネラトンカテーテル	ザ ヘルス チーマンカテーテル
ザ ヘルス ロートネラトンカテーテル	ザ ヘルス 胃カテーテル
ザ ヘルス 腸カテーテル	ザ ヘルス 栄養カテーテル
ザ ヘルス エネマシリンジ	レーベン管

上記製品は**天然ゴム**を使用しております。

※天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

●シリコーンゴム使用製品

ザ ヘルス シリコンネラトンカテーテル

上記製品は**シリコーンゴム**を使用しております。

泌尿器系カテーテル



管理医療機器 再使用禁止 未滅菌品

ザヘルス ネラトンカテーテル


医療機器認証番号：20600BZZ01067000

材質：天然ゴム
JMDNコード：10734000
一般的名称：ネラトンカテーテル

クラス分類：Ⅱ
生物由来物：非該当
保険償還区分：請求不可

特徴

- 天然ゴム製の「導尿用カテーテル」です。
- 液垂れを止めるツバが付いています。

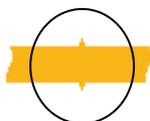

標準型

ネラトン穴1



A型

先穴1



B型

先穴1、側孔1



C型

先穴1、側孔2



標準型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-ANS103N	4995407100407	3EG	外径 2.5mm × 330mm	12本/袋 10袋/箱	5,060/袋
H-ANS104N	4995407100414	4EG	外径 3.0mm × 330mm		
H-ANS105N	4995407100421	5EG	外径 3.5mm × 330mm		
H-ANS106N	4995407100438	6EG	外径 4.0mm × 330mm		
H-ANS107N	4995407100445	7EG	外径 4.5mm × 330mm		
H-ANS108N	4995407100452	8EG	外径 5.0mm × 330mm		
H-ANS109N	4995407100469	9EG	外径 5.5mm × 330mm		
H-ANS110N	4995407100476	10EG	外径 6.0mm × 330mm		
H-ANS111N	4995407100483	11EG	外径 6.5mm × 330mm		
H-ANS112N	4995407100490	12EG	外径 7.0mm × 330mm		
H-ANS113N	4995407100506	13EG	外径 7.5mm × 330mm		
H-ANS114N	4995407100513	14EG	外径 8.0mm × 330mm		
H-ANS115N	4995407100520	15EG	外径 8.5mm × 330mm		
* H-ANS116N	4995407100537	16EG	外径 9.0mm × 330mm		6本/袋 10袋/箱
* H-ANS117N	4995407100544	17EG	外径 9.5mm × 330mm	10,080/袋	
* H-ANS118N	4995407100551	18EG	外径 10.0mm × 330mm		

■A型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)	
H-ANA103N	4995407100568	3EG	外径 2.5mm × 330mm	12本/袋 10袋/箱	6,320/袋	
H-ANA104N	4995407100575	4EG	外径 3.0mm × 330mm			6,090/袋
H-ANA105N	4995407100582	5EG	外径 3.5mm × 330mm			
H-ANA106N	4995407100599	6EG	外径 4.0mm × 330mm		7,240/袋	
H-ANA107N	4995407100605	7EG	外径 4.5mm × 330mm			
H-ANA108N	4995407100612	8EG	外径 5.0mm × 330mm			
H-ANA109N	4995407100629	9EG	外径 5.5mm × 330mm			
H-ANA110N	4995407100636	10EG	外径 6.0mm × 330mm			
H-ANA111N	4995407100643	11EG	外径 6.5mm × 330mm			
H-ANA112N	4995407100650	12EG	外径 7.0mm × 330mm			
H-ANA113N	4995407100667	13EG	外径 7.5mm × 330mm			
H-ANA114N	4995407100674	14EG	外径 8.0mm × 330mm			
H-ANA115N	4995407100681	15EG	外径 8.5mm × 330mm			
* H-ANA116N	4995407100698	16EG	外径 9.0mm × 330mm		6本/袋 10袋/箱	20,160/袋
* H-ANA117N	4995407100704	17EG	外径 9.5mm × 330mm			10,080/袋
* H-ANA118N	4995407100711	18EG	外径 10.0mm × 330mm			

■B型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)	
H-ANB103N	4995407100728	3EG	外径 2.5mm × 330mm	12本/袋 10袋/箱	7,200/袋	
H-ANB104N	4995407100735	4EG	外径 3.0mm × 330mm			6,840/袋
H-ANB105N	4995407100742	5EG	外径 3.5mm × 330mm			
H-ANB106N	4995407100759	6EG	外径 4.0mm × 330mm		7,920/袋	
H-ANB107N	4995407100766	7EG	外径 4.5mm × 330mm			
H-ANB108N	4995407100773	8EG	外径 5.0mm × 330mm			
H-ANB109N	4995407100780	9EG	外径 5.5mm × 330mm			
H-ANB110N	4995407100797	10EG	外径 6.0mm × 330mm			
H-ANB111N	4995407100803	11EG	外径 6.5mm × 330mm			
H-ANB112N	4995407100810	12EG	外径 7.0mm × 330mm			
H-ANB113N	4995407100827	13EG	外径 7.5mm × 330mm			
H-ANB114N	4995407100834	14EG	外径 8.0mm × 330mm			
H-ANB115N	4995407100841	15EG	外径 8.5mm × 330mm			
* H-ANB116N	4995407100858	16EG	外径 9.0mm × 330mm		6本/袋 10袋/箱	20,160/袋
* H-ANB117N	4995407100865	17EG	外径 9.5mm × 330mm			10,080/袋
* H-ANB118N	4995407100872	18EG	外径 10.0mm × 330mm			


■C型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)	
H-ANC103N	4995407100889	3EG	外径 2.5mm × 330mm	12本/袋 10袋/箱	7,010/袋	
H-ANC104N	4995407100896	4EG	外径 3.0mm × 330mm			6,670/袋
H-ANC105N	4995407100902	5EG	外径 3.5mm × 330mm			
H-ANC106N	4995407100919	6EG	外径 4.0mm × 330mm		7,930/袋	
H-ANC107N	4995407100926	7EG	外径 4.5mm × 330mm			
H-ANC108N	4995407100933	8EG	外径 5.0mm × 330mm			
H-ANC109N	4995407100940	9EG	外径 5.5mm × 330mm			
H-ANC110N	4995407100957	10EG	外径 6.0mm × 330mm			
H-ANC111N	4995407100964	11EG	外径 6.5mm × 330mm			
H-ANC112N	4995407100971	12EG	外径 7.0mm × 330mm			
H-ANC113N	4995407100988	13EG	外径 7.5mm × 330mm			
H-ANC114N	4995407100995	14EG	外径 8.0mm × 330mm			
H-ANC115N	4995407101008	15EG	外径 8.5mm × 330mm			
* H-ANC116N	4995407101015	16EG	外径 9.0mm × 330mm		6本/袋 10袋/箱	20,160/袋
* H-ANC117N	4995407101022	17EG	外径 9.5mm × 330mm			10,080/袋
* H-ANC118N	4995407101039	18EG	外径 10.0mm × 330mm			

※標準小売価格には消費税を含んでおりません。

※ * 印は受注生産品になります。

泌尿器系カテーテル

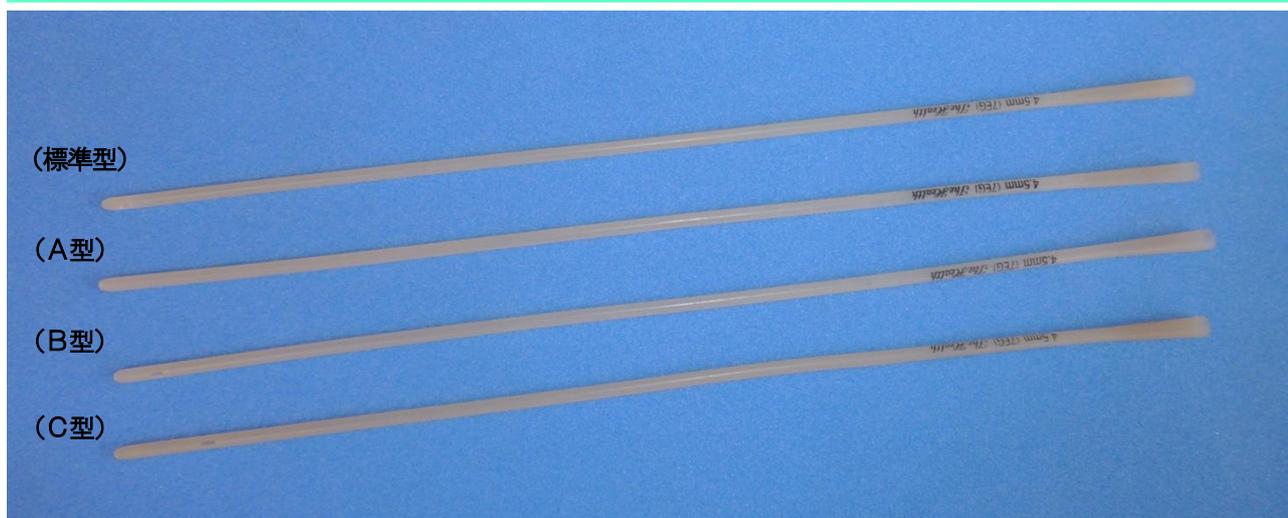

管理医療機器 再使用禁止 未滅菌品

ザヘルス シリコンネラトンカテーテル

医療機器承認番号：16300BZZ00983000

材質：シリコンゴム

クラス分類：Ⅱ

JMDNコード：10734000・35415020・31249000

生物由来物：非該当

一般的名称：ネラトンカテーテル・腸管用チューブ
気管支吸引用カテーテル

保険償還区分：請求不可

特徴

- シリコンゴム製の「導尿用カテーテル」です。
- 「腸洗浄用」や「気管支吸引用」としてもご使用できます。
- 接続側を拡げてロート状にすることにより、シリンジや各種コネクター等と接続しやすい構造です。

標準型

ネラトン穴 1

A型

先穴 1

B型

先穴 1、側孔 1

C型

先穴 1、側孔 2



標準型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-ASS104Q	4995407101961	4EG	外径 3.0mm × 360mm	1本/袋 12袋/箱	1,360/袋
H-ASS105Q	4995407101978	5EG	外径 3.5mm × 360mm		
H-ASS106Q	4995407101985	6EG	外径 4.0mm × 360mm		
H-ASS107Q	4995407101992	7EG	外径 4.5mm × 360mm		
H-ASS108Q	4995407102005	8EG	外径 5.0mm × 360mm		
H-ASS109Q	4995407102012	9EG	外径 5.5mm × 360mm		
H-ASS110Q	4995407102029	10EG	外径 6.0mm × 360mm		1,400/袋
H-ASS111Q	4995407102036	11EG	外径 6.5mm × 360mm		
H-ASS112Q	4995407102043	12EG	外径 7.0mm × 360mm		
H-ASS113Q	4995407102050	13EG	外径 7.5mm × 360mm		
H-ASS114Q	4995407102067	14EG	外径 8.0mm × 360mm		
H-ASS115Q	4995407102074	15EG	外径 8.5mm × 360mm		

■A型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-ASA104Q	4995407102081	4EG	外径 3.0mm × 360mm	1本/袋 12袋/箱	1,410/袋
H-ASA105Q	4995407102098	5EG	外径 3.5mm × 360mm		
H-ASA106Q	4995407102104	6EG	外径 4.0mm × 360mm		
H-ASA107Q	4995407102111	7EG	外径 4.5mm × 360mm		
H-ASA108Q	4995407102128	8EG	外径 5.0mm × 360mm		
H-ASA109Q	4995407102135	9EG	外径 5.5mm × 360mm		1,470/袋
H-ASA110Q	4995407102142	10EG	外径 6.0mm × 360mm		
H-ASA111Q	4995407102159	11EG	外径 6.5mm × 360mm		
H-ASA112Q	4995407102166	12EG	外径 7.0mm × 360mm		
H-ASA113Q	4995407102173	13EG	外径 7.5mm × 360mm		
H-ASA114Q	4995407102180	14EG	外径 8.0mm × 360mm		
H-ASA115Q	4995407102197	15EG	外径 8.5mm × 360mm		

■B型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-ASB104Q	4995407102203	4EG	外径 3.0mm × 360mm	1本/袋 12袋/箱	1,540/袋
H-ASB105Q	4995407102210	5EG	外径 3.5mm × 360mm		
H-ASB106Q	4995407102227	6EG	外径 4.0mm × 360mm		
H-ASB107Q	4995407102234	7EG	外径 4.5mm × 360mm		
H-ASB108Q	4995407102241	8EG	外径 5.0mm × 360mm		
H-ASB109Q	4995407102258	9EG	外径 5.5mm × 360mm		1,600/袋
H-ASB110Q	4995407102265	10EG	外径 6.0mm × 360mm		
H-ASB111Q	4995407102272	11EG	外径 6.5mm × 360mm		
H-ASB112Q	4995407102289	12EG	外径 7.0mm × 360mm		
H-ASB113Q	4995407102296	13EG	外径 7.5mm × 360mm		
H-ASB114Q	4995407102302	14EG	外径 8.0mm × 360mm		
H-ASB115Q	4995407102319	15EG	外径 8.5mm × 360mm		

■C型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-ASC104Q	4995407102326	4EG	外径 3.0mm × 360mm	1本/袋 12袋/箱	1,700/袋
H-ASC105Q	4995407102333	5EG	外径 3.5mm × 360mm		
H-ASC106Q	4995407102340	6EG	外径 4.0mm × 360mm		
H-ASC107Q	4995407102357	7EG	外径 4.5mm × 360mm		
H-ASC108Q	4995407102364	8EG	外径 5.0mm × 360mm		
H-ASC109Q	4995407102371	9EG	外径 5.5mm × 360mm		1,760/袋
H-ASC110Q	4995407102388	10EG	外径 6.0mm × 360mm		
H-ASC111Q	4995407102395	11EG	外径 6.5mm × 360mm		
H-ASC112Q	4995407102401	12EG	外径 7.0mm × 360mm		
H-ASC113Q	4995407102418	13EG	外径 7.5mm × 360mm		
H-ASC114Q	4995407102425	14EG	外径 8.0mm × 360mm		
H-ASC115Q	4995407102432	15EG	外径 8.5mm × 360mm		

※標準小売価格には消費税を含んでおりません。

泌尿器系カテーテル



管理医療機器 再使用禁止 ガンマ線滅菌済

ザヘルス ロートネラトンカテーテル

医療機器承認番号：21100BZZ00249000

材質：天然ゴム

クラス分類：Ⅱ

JMDNコード：10734000・35415020・31249000

生物由来物：非該当

一般的名称：ネラトンカテーテル・腸管用チューブ
気管支吸引用カテーテル

保険償還区分：請求不可

特徴

- 天然ゴム製の「導尿用カテーテル」です。「腸洗浄用」や「気管支吸引用」としてもご使用できます。
- 接続側を拡げてロート状にすることにより、シリンジや各種コネクター等と接続しやすい構造です。
- ガンマ線滅菌済みです。開封後直ちにご使用できます。

標準型 ネラトン穴 1

C型 先穴 1、側孔 2

標準型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-ARS308N	4995407100001	8Fr	外径 2.7mm × 330mm	1本/袋 5袋/箱	3,950/箱
H-ARS310N	4995407100018	10Fr	外径 3.3mm × 330mm		
H-ARS312N	4995407100025	12Fr	外径 4.0mm × 330mm		
H-ARS314N	4995407100032	14Fr	外径 4.7mm × 330mm		
H-ARS316N	4995407100049	16Fr	外径 5.3mm × 330mm		
H-ARS318N	4995407100056	18Fr	外径 6.0mm × 330mm		
H-ARS320N	4995407100063	20Fr	外径 6.7mm × 330mm		
H-ARS322N	4995407100070	22Fr	外径 7.3mm × 330mm		
H-ARS324N	4995407100087	24Fr	外径 8.0mm × 330mm		
H-ARS326N	4995407100094	26Fr	外径 8.7mm × 330mm		

C型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-ARC308N	4995407100308	8Fr	外径 2.7mm × 330mm	1本/袋 5袋/箱	5,400/箱
H-ARC310N	4995407100315	10Fr	外径 3.3mm × 330mm		
H-ARC312N	4995407100322	12Fr	外径 4.0mm × 330mm		
H-ARC314N	4995407100339	14Fr	外径 4.7mm × 330mm		
H-ARC316N	4995407100346	16Fr	外径 5.3mm × 330mm		
H-ARC318N	4995407100353	18Fr	外径 6.0mm × 330mm		
H-ARC320N	4995407100360	20Fr	外径 6.7mm × 330mm		
H-ARC322N	4995407100377	22Fr	外径 7.3mm × 330mm		
H-ARC324N	4995407100384	24Fr	外径 8.0mm × 330mm		
H-ARC326N	4995407100391	26Fr	外径 8.7mm × 330mm		

※標準小売価格には消費税を含んでおりません。

2025.4.1-14

泌尿器系カテーテル



管理医療機器 再使用禁止 未滅菌品

ザヘルス チーマンカテーテル

医療機器認証番号：15500BZZ00198000

材質：天然ゴム

クラス分類：Ⅱ

JMDNコード：10737000

生物由来物：非該当

一般的名称：先端オリーブ型カテーテル

保険償還区分：請求不可

特徴

- 尿道狭窄患者向け天然ゴム製の「導尿用カテーテル」です。
- 接続側を拡げてロート状にすることにより、シリンジや各種コネクター等と接続しやすい構造です。
- 挿入した際、先端の向きが分かるようにガイドが付いています。



タイプ	形状
標準型	穴形状：側孔 1  全長：407mm

標準型

	製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
	H-ATS108N	4995407101619	8Fr	外径 2.7mm × 407mm	12本/袋 10袋/箱	23,760/袋
	H-ATS110N	4995407101633	10Fr	外径 3.3mm × 407mm		
	H-ATS112N	4995407101657	12Fr	外径 4.0mm × 407mm		
	H-ATS114N	4995407101671	14Fr	外径 4.7mm × 407mm		
	H-ATS116N	4995407101695	16Fr	外径 5.3mm × 407mm		
	H-ATS118N	4995407101718	18Fr	外径 6.0mm × 407mm	6本/袋 10袋/箱	11,880/袋
	H-ATS120N	4995407101732	20Fr	外径 6.7mm × 407mm		
*	H-ATS122N	4995407101756	22Fr	外径 7.3mm × 407mm		
*	H-ATS124N	4995407101763	24Fr	外径 8.0mm × 407mm		
*	H-ATS126N	4995407101770	26Fr	外径 8.7mm × 407mm		
*	H-ATS128N	4995407101787	28Fr	外径 9.3mm × 407mm		
*	H-ATS130N	4995407101794	30Fr	外径 10.0mm × 407mm	15,420/袋	

※標準小売価格には消費税を含んでおりません。

※ * 印は受注生産品になります。

2025.4.1-12

消化器系カテーテル



管理医療機器 再使用禁止 未滅菌品

ザヘルス 胃カテーテル

医療機器認証番号：15700BZZ00906000

材質：天然ゴム
JMDNコード：14230000
一般的名称：胃内排泄用チューブ

クラス分類：Ⅱ
生物由来物：非該当
保険償還区分：請求不可

特徴

- 天然ゴム製の「胃洗浄用カテーテル」です。
- 天然ゴム製のためトルクや腰があり、術者の手元で巻く事が少ないです。
- 素材が柔軟なため、皮膚や粘膜に当たってもソフトな感じます。

タイプ	形状
標準型	穴形状：ネラトン穴1、側孔1  全長：910mm

■標準型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-CSS106N	4995407103118	6mm	外径 6.0mm × 910mm	2本/袋 5袋/箱	4,600/袋
H-CSS107N	4995407103125	7mm	外径 7.0mm × 910mm		
H-CSS108N	4995407103132	8mm	外径 8.0mm × 910mm		
H-CSS109N	4995407103149	9mm	外径 9.0mm × 910mm		
H-CSS110N	4995407103156	10mm	外径 10.0mm × 910mm		
H-CSS111N	4995407103163	11mm	外径 11.0mm × 910mm		
H-CSS112N	4995407103170	12mm	外径 12.0mm × 910mm	1本/袋 5袋/箱	4,480/袋
H-CSS113N	4995407103187	13mm	外径 13.0mm × 910mm		
H-CSS114N	4995407103194	14mm	外径 14.0mm × 910mm		
H-CSS115N	4995407103200	15mm	外径 15.0mm × 910mm		

※標準小売価格には消費税を含んでおりません。

消化器系カテーテル



管理医療機器 再使用禁止 未滅菌品

ザヘルス 腸カテーテル

医療機器認証番号：15700BZZ00907000

材質：天然ゴム
JMDNコード：35415020
一般的名称：腸管用チューブ

クラス分類：Ⅱ
生物由来物：非該当
保険償還区分：請求不可

特徴

- 天然ゴム製の「腸洗浄用カテーテル」です。
- 天然ゴム製のためトルクや腰があり、術者の手元で巻く事が少ないです。
- 接続側を拡げてロート状にすることにより、シリンジや各種コネクタ等と接続しやすい構造です。

形状

穴形状：先穴1、側孔1




全長：490mm

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-CRS108N	4995407103248	No.8	外径 4.5mm × 490mm	6本/袋 1袋/箱	11,380/袋
H-CRS109N	4995407103255	No.9	外径 5.0mm × 490mm		
H-CRS110N	4995407103262	No.10	外径 5.5mm × 490mm		
H-CRS111N	4995407103279	No.11	外径 6.0mm × 490mm		
H-CRS112N	4995407103286	No.12	外径 6.5mm × 490mm		
H-CRS113N	4995407103293	No.13	外径 7.0mm × 490mm		
H-CRS114N	4995407103309	No.14	外径 7.5mm × 490mm		
H-CRS115N	4995407103316	No.15	外径 8.0mm × 490mm		
H-CRS116N	4995407103323	No.16	外径 8.5mm × 490mm	6本/袋 1袋/箱	21,390/袋
H-CRS117N	4995407103330	No.17	外径 9.0mm × 490mm		
H-CRS118N	4995407103347	No.18	外径 9.5mm × 490mm		
H-CRS119N	4995407103354	No.19	外径 10.0mm × 490mm		
H-CRS120N	4995407103361	No.20	外径 10.5mm × 490mm		

※標準小売価格には消費税を含んでおりません。

消化器系カテーテル

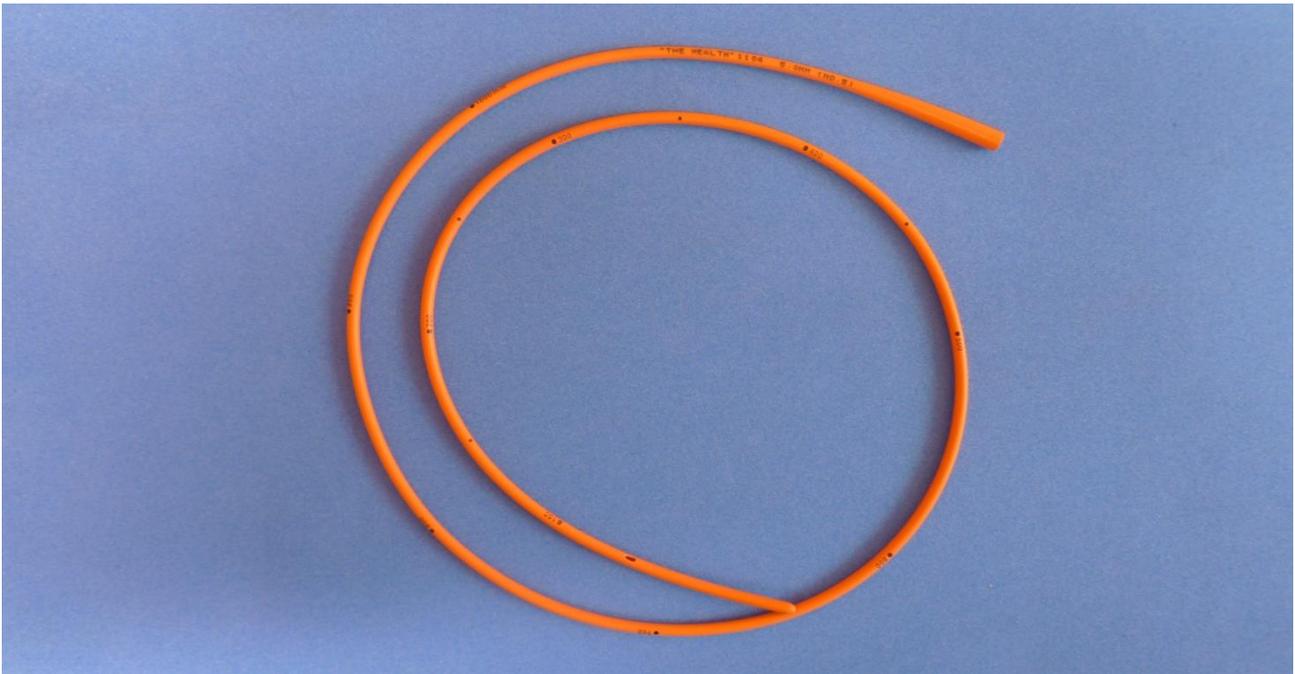

管理医療機器 再使用禁止 未滅菌品

ザヘルス 栄養カテーテル（旧規格）

医療機器認証番号

※新規格（ISO80369-3）の経腸栄養投与セット等に接続する場合には、
変換コネクタが必要になります。

15500BZZ00200000

材質：天然ゴム

クラス分類：Ⅱ

JMDNコード：16798000

生物由来物：非該当

一般的名称：食道経腸栄養用チューブ

保険償還区分：請求不可

特徴

- 「経腸栄養剤注入用具」用のカテーテルです。
- 経口経管栄養法（I O C法、O E法）に適したカテーテルです。
- 素材が柔軟なため、皮膚や粘膜に当たってもソフトな感じます。
- 天然ゴム製のためトルクや腰があり、ガイドワイヤー無しでも入れ易いカテーテルです。



タイプ	形状
標準型	穴形状：ネラトン穴 1、側孔 1  全長：1220mm

標準型

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-CFS103N	4995407102449	No.3	外径 3.5mm × 1220mm	1本/袋 10袋/箱	3,030/袋
H-CFS104N	4995407102456	No.4	外径 4.5mm × 1220mm		2,640/袋
H-CFS105N	4995407102463	No.5	外径 5.0mm × 1220mm		
H-CFS106N	4995407102470	No.6	外径 6.0mm × 1220mm		

※標準小売価格には消費税を含んでおりません。

耳鼻・眼科・脳神経科系製品



一般医療機器 再使用禁止 未滅菌品

ザヘルス エネマシリンジ

医療機器届出番号：20B1X00001000001

材質：天然ゴム
JMDNコード：41599000
一般的名称：鼻用洗浄器

クラス分類：I
生物由来物：非該当
保険償還区分：請求不可

特徴

■ 鼻を洗浄する為に使用する洗浄器です。

タイプ	形状
丸先	<p style="text-align: right;">全長：771mm</p>

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
H-GES101N	4995407003005	丸先	771mm	1本/袋 5袋/箱	3.160/袋

※標準小売価格には消費税を含んでおりません。


操作方法

あらかじめ本品に洗浄液を数回通して、内部を洗い出してから使用すること。

1. 鼻腔洗浄の為に洗浄液（25～30℃）を500ml（洗浄1回分量）用意する。洗浄液は、通常、市販の生理食塩水（生食）を用いるが、0.002%程のリバノール生食液又は0.002%程度の過マンガン酸カリ生食液を使用する場合もあるので、医師の指導の下で選択する。生理食塩水（生食）を、水道水を用いて自ら調整する場合は、10分以上沸騰させた「湯冷まし」を用意し、食塩（ヨード化していない物が望ましい）を加えて、0.9%濃度に正確に調整する。
2. エネマシリンジ本体内部をあらかじめ洗い出す為に、吸引弁（D）を洗浄液に入れ、球状のスPOINT（C）を手で握って離す動作を繰り返す事で、加圧操作を反復させ、内部に洗浄液を充填させてはノズル（A）から吐出させる動作を数回行う。
3. 患者は、頭をやや前屈させた姿勢でノズル（A）を片方の鼻孔に入れて「あー」と軽く発声しながら軽くスPOINT（C）を握り、自分に合った圧力で洗浄液を押し出す。洗浄液が鼻咽腔から口に達したら、押し出しを止めて洗浄液を口や鼻から流し出す。これを数回繰り返した後、他方の鼻孔にノズル（A）を差しかえて、同様の動作を行う。
4. 洗浄後は、頭を前屈させたまま軽く左右に振り、十分に洗浄液を鼻から出すこと。鼻かみは、優しく行なうこと。

2025.4.1-9

その他の製品

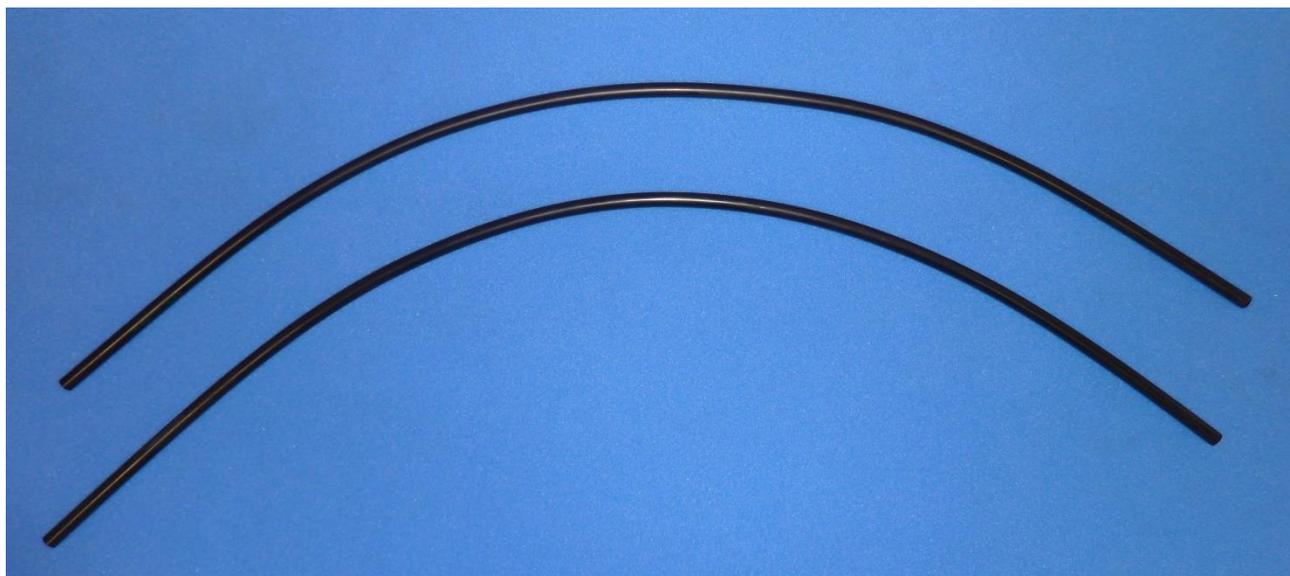

レーベン管

未滅菌品

材 質：天然ゴム

特 徴

- 聴診器用の繋ぎ管です。

形状

5.5×8.8×757L

製品番号	JANコード	呼称	サイズ	包装単位	標準小売価格(円)
1100101	4995407002275	太	5.5×8.8×757	1組(2本)／袋 10袋／箱	2,400／組

※標準小売価格には消費税を含んでおりません。

カテーテルサイズ換算表

EG:English Gauge イングリッシュサイズ

EG	外径(mm)	Fr
-	0.3	1
00	0.5	-
-	0.7	2
0	1.0	3
-	1.3	4
1	1.5	-
-	1.7	5
2	2.0	6
-	2.3	7
3	2.5	-
-	2.7	8
4	3.0	9
-	3.3	10
5	3.5	-
-	3.7	11
6	4.0	12
-	4.3	13
7	4.5	-
-	4.7	14
8	5.0	15
-	5.3	16
9	5.5	-
-	5.7	17
10	6.0	18
-	6.3	19
11	6.5	-
-	6.7	20

Fr:French Gauge フレンチサイズ

EG	外径(mm)	Fr
12	7.0	21
-	7.3	22
13	7.5	-
-	7.7	23
14	8.0	24
-	8.3	25
15	8.5	-
-	8.7	26
16	9.0	27
-	9.3	28
17	9.5	-
-	9.7	29
18	10.0	30
-	10.3	31
19	10.5	-
-	10.7	32
20	11.0	33
-	11.3	34
21	11.5	-
-	11.7	35
22	12.0	36
-	12.3	37
23	12.5	-
-	12.7	38
24	13.0	39
-	13.3	40
25	13.5	-

EG	外径(mm)	Fr
-	13.7	41
26	14.0	42
-	14.3	43
27	14.5	-
-	14.7	44
28	15.0	45
-	15.3	46
29	15.5	-
-	15.7	47
30	16.0	48
-	16.3	49
31	16.5	-
-	16.7	50
32	17.0	51
-	17.3	52
33	17.5	-
-	17.7	53
34	18.0	54
-	18.3	55
35	18.5	-
-	18.7	56
36	19.0	57
-	19.3	58
37	19.5	-
-	19.7	59
38	20.0	60

※ 上記換算表は一般的なものですので、弊社製品では若干の違いがある場合がございます。

**IZUMO
Health**

株式会社イズモヘルス

URL <https://www.izumo-health-t.com>

本 社 長野県安曇野市明科七貴6057番地(〒399-7104)
TEL 0263-62-2392 FAX 0263-62-4548